


exocad

presents



Bitte den Downloadordner öffnen

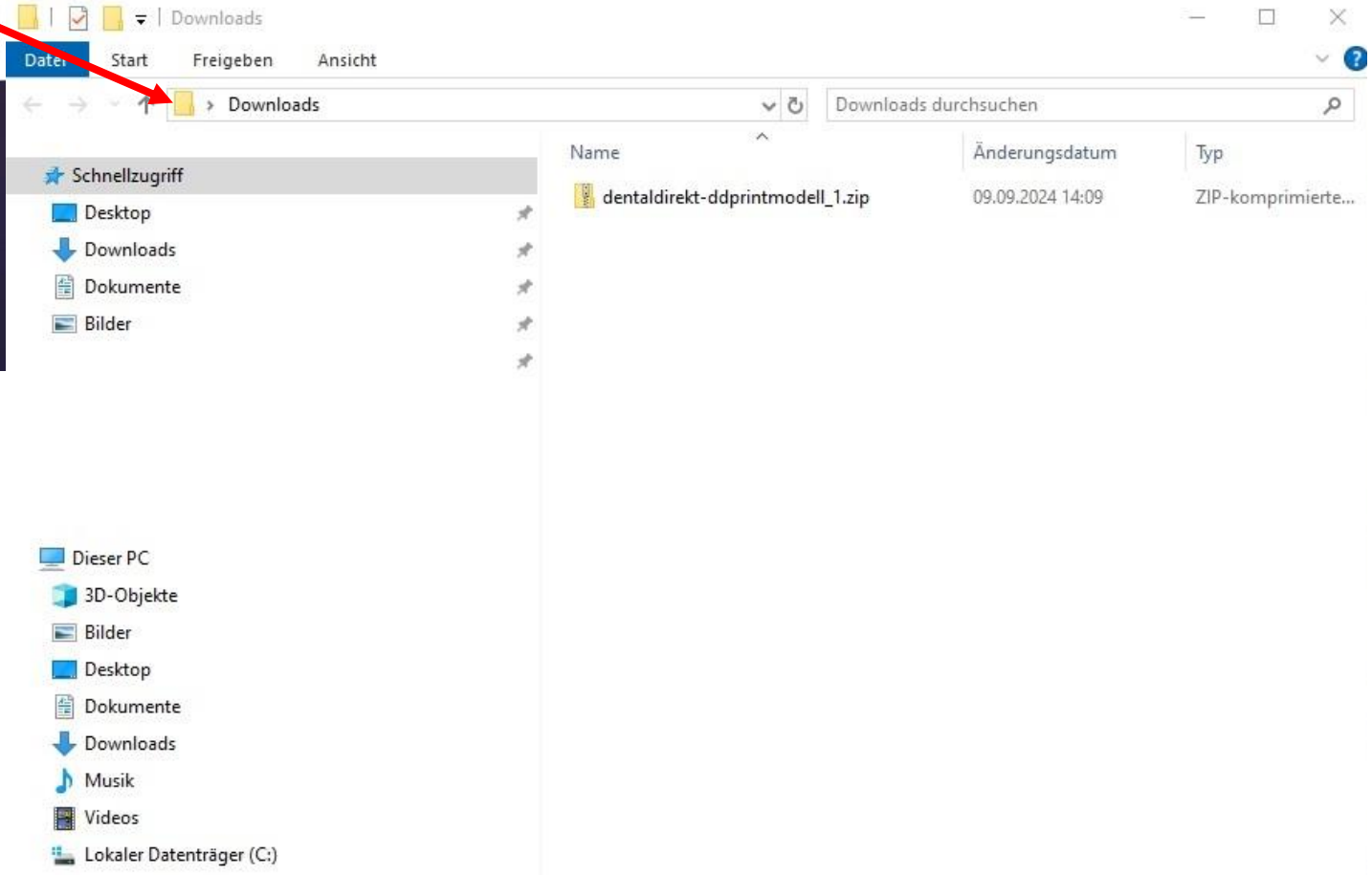

Downloads

Datei Start Freigegeben Ansicht

Downloads

Downloads durchsuchen

Name	Änderungsdatum	Typ
dentaldirekt-ddprintmodell_1.zip	09.09.2024 14:09	ZIP-komprimierte...



Schnellzugriff


- Desktop
- Downloads
- Dokumente
- Bilder

Dieser PC

- 3D-Objekte
- Bilder
- Desktop
- Dokumente
- Downloads
- Musik
- Videos
- Lokaler Datenträger (C:)

Download ddprintmodel.XML Ordner entpacken

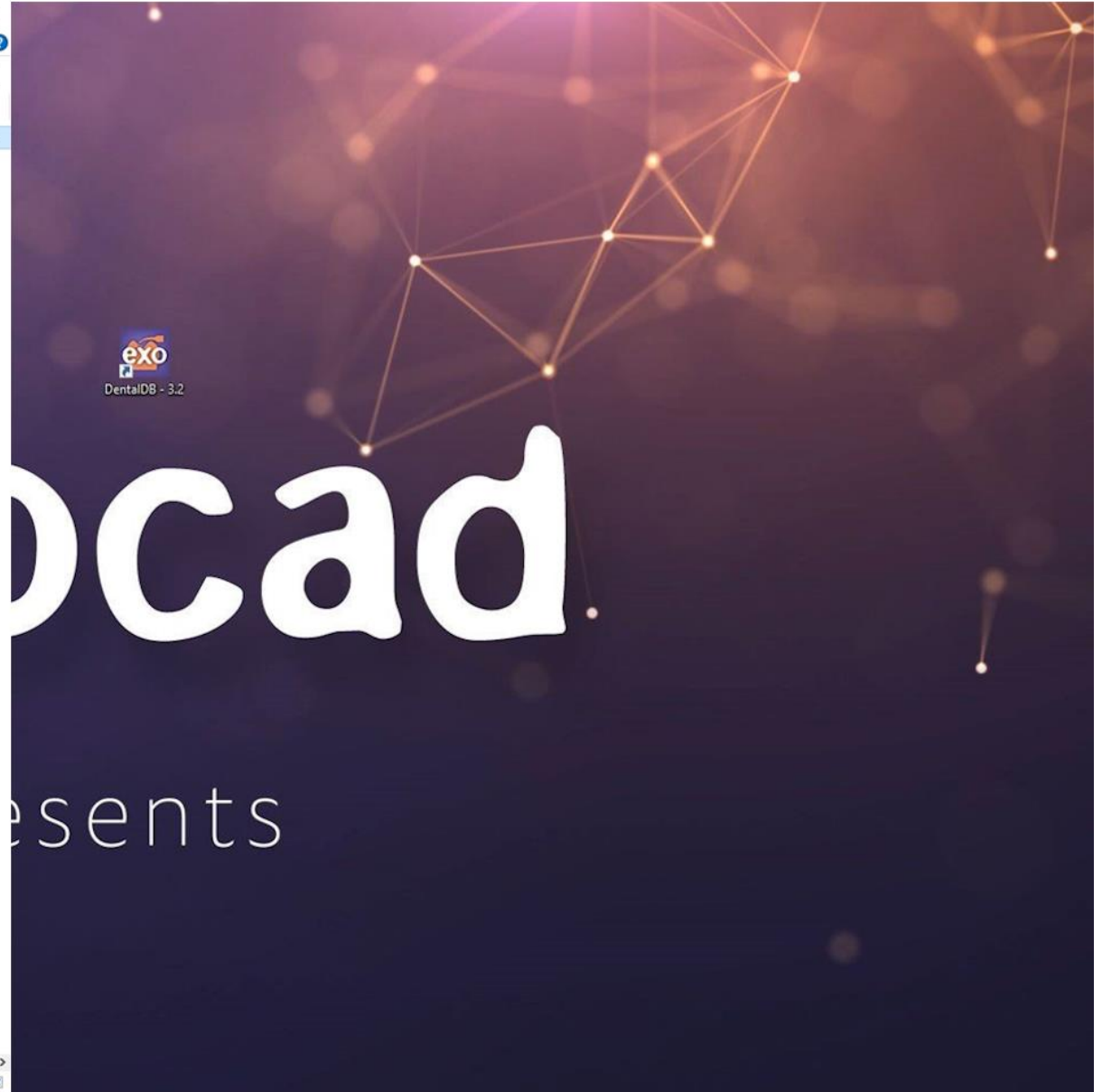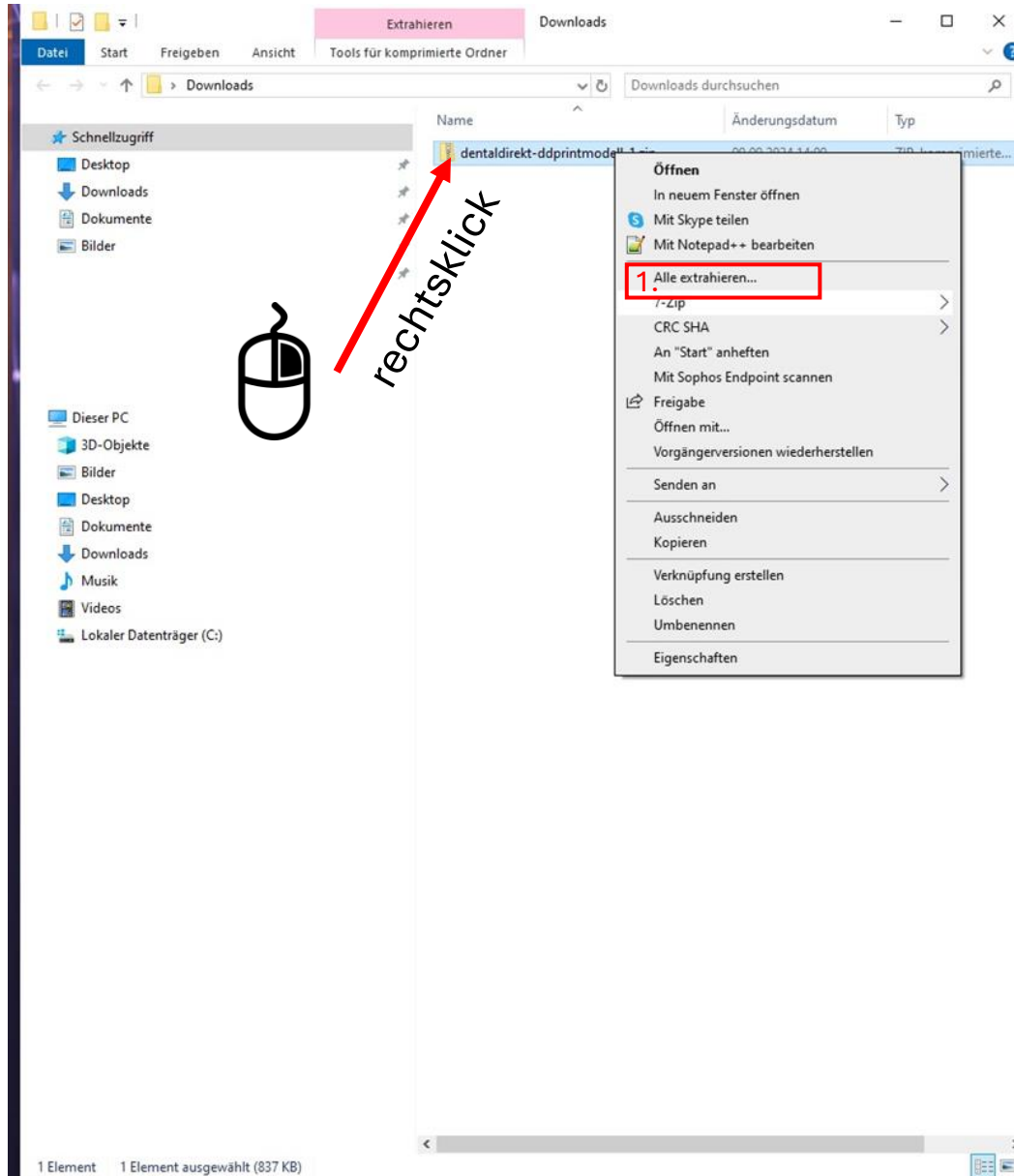


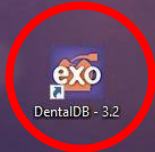


rechtsklick auf das Exocad Icon


exocad

presents

In das Exocad Hauptverzeichnis gehen

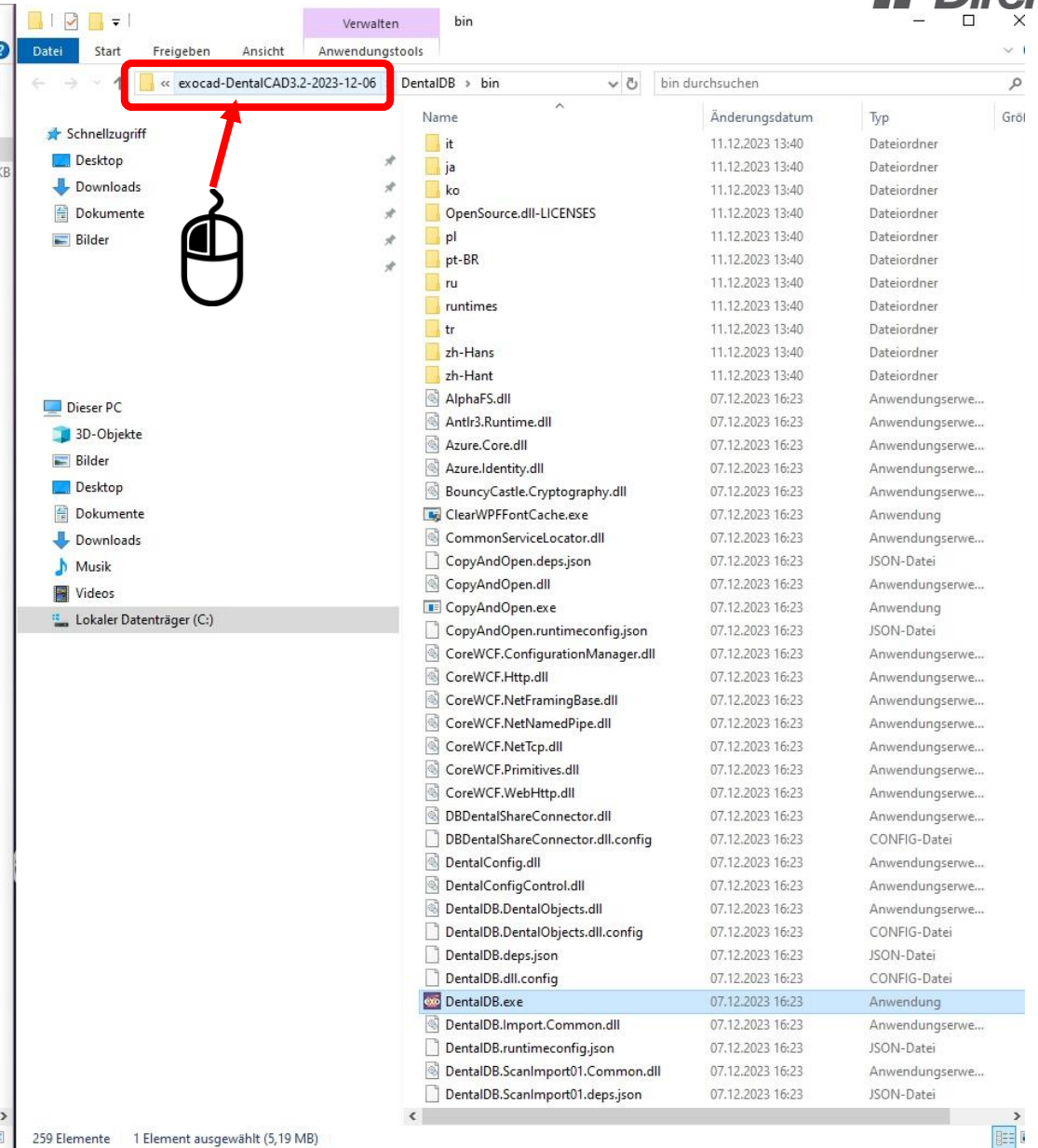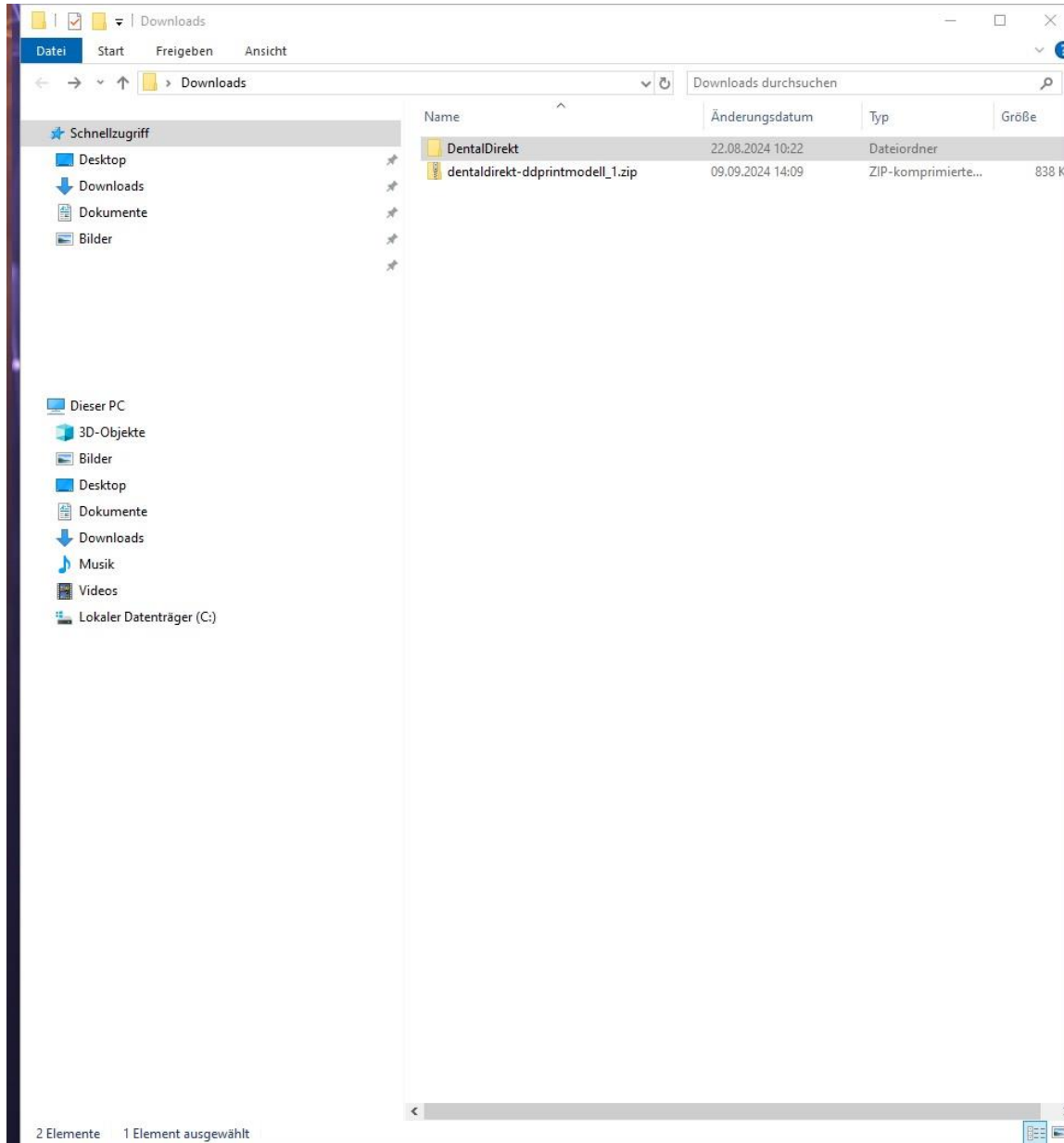

Den Ordner DentalCADApp öffnen


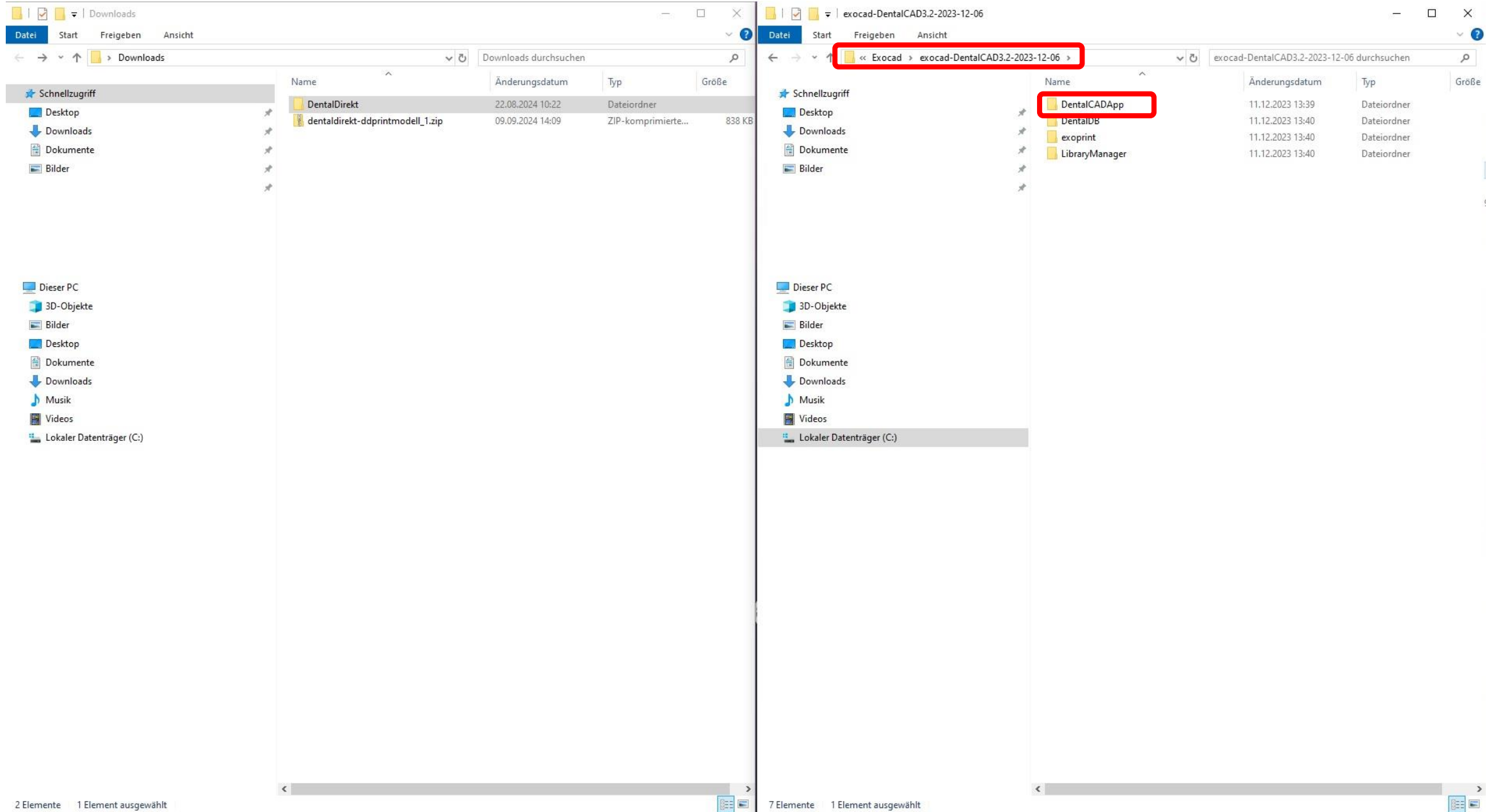


The image shows two side-by-side screenshots of a Windows File Explorer window. The left window shows the 'Downloads' folder with two items: 'DentalDirekt' and 'dentaldirekt-ddprintmodell_1.zip'. The right window shows the path 'Exocad > exocad-DentalCAD3.2-2023-12-06' selected in the address bar, and the 'DentalCADApp' folder is highlighted in the main pane. The status bar at the bottom of the right window indicates '7 Elemente' and '1 Element ausgewählt'.



Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
DentalDirekt	22.08.2024 10:22	Dateiordner	
dentaldirekt-ddprintmodell_1.zip	09.09.2024 14:09	ZIP-komprimierte...	838 KB

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
DentalCADApp	11.12.2023 13:39	Dateiordner	
DentalDB	11.12.2023 13:40	Dateiordner	
exoprint	11.12.2023 13:40	Dateiordner	
LibraryManager	11.12.2023 13:40	Dateiordner	


Den Ordner library öffnen

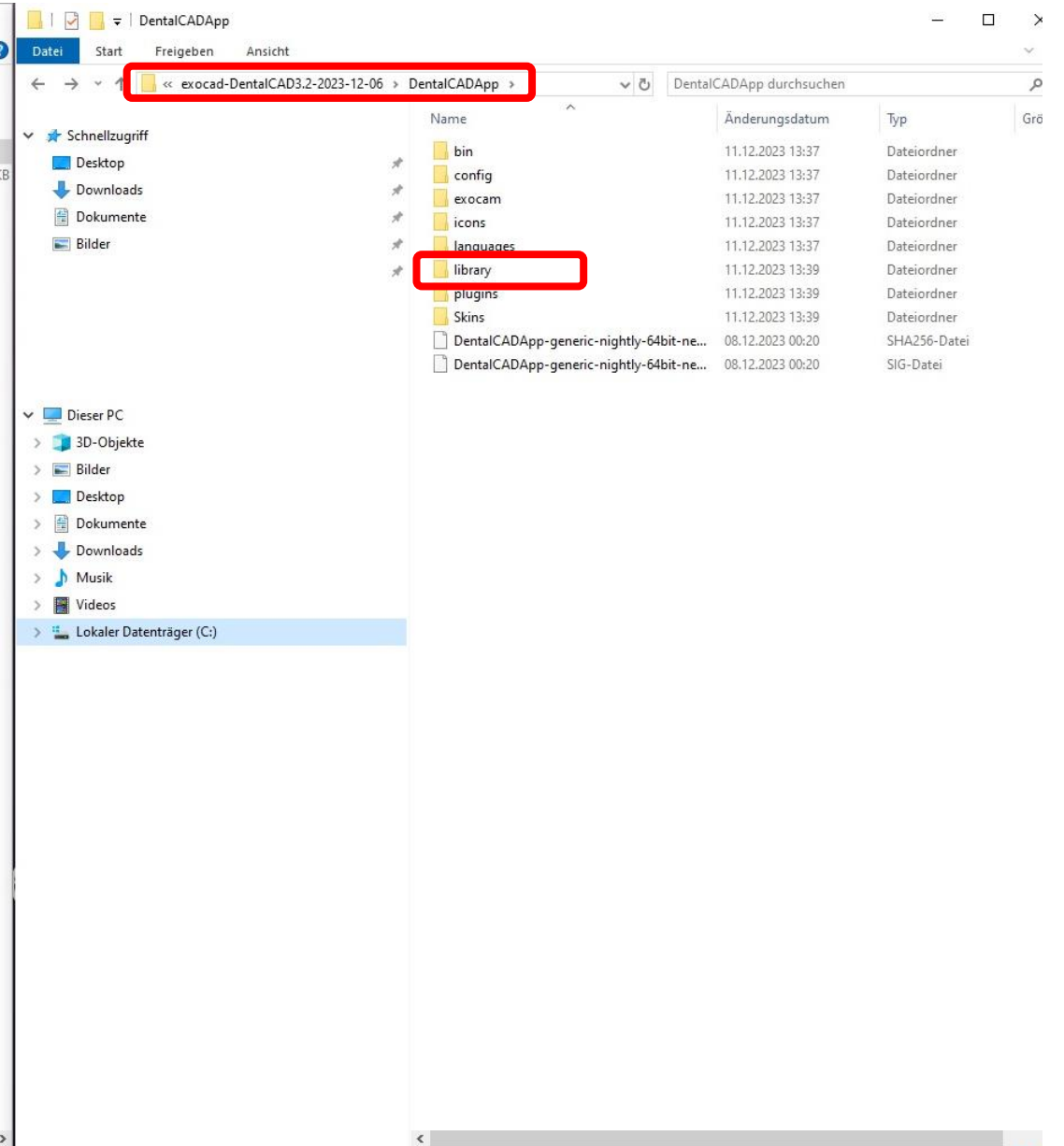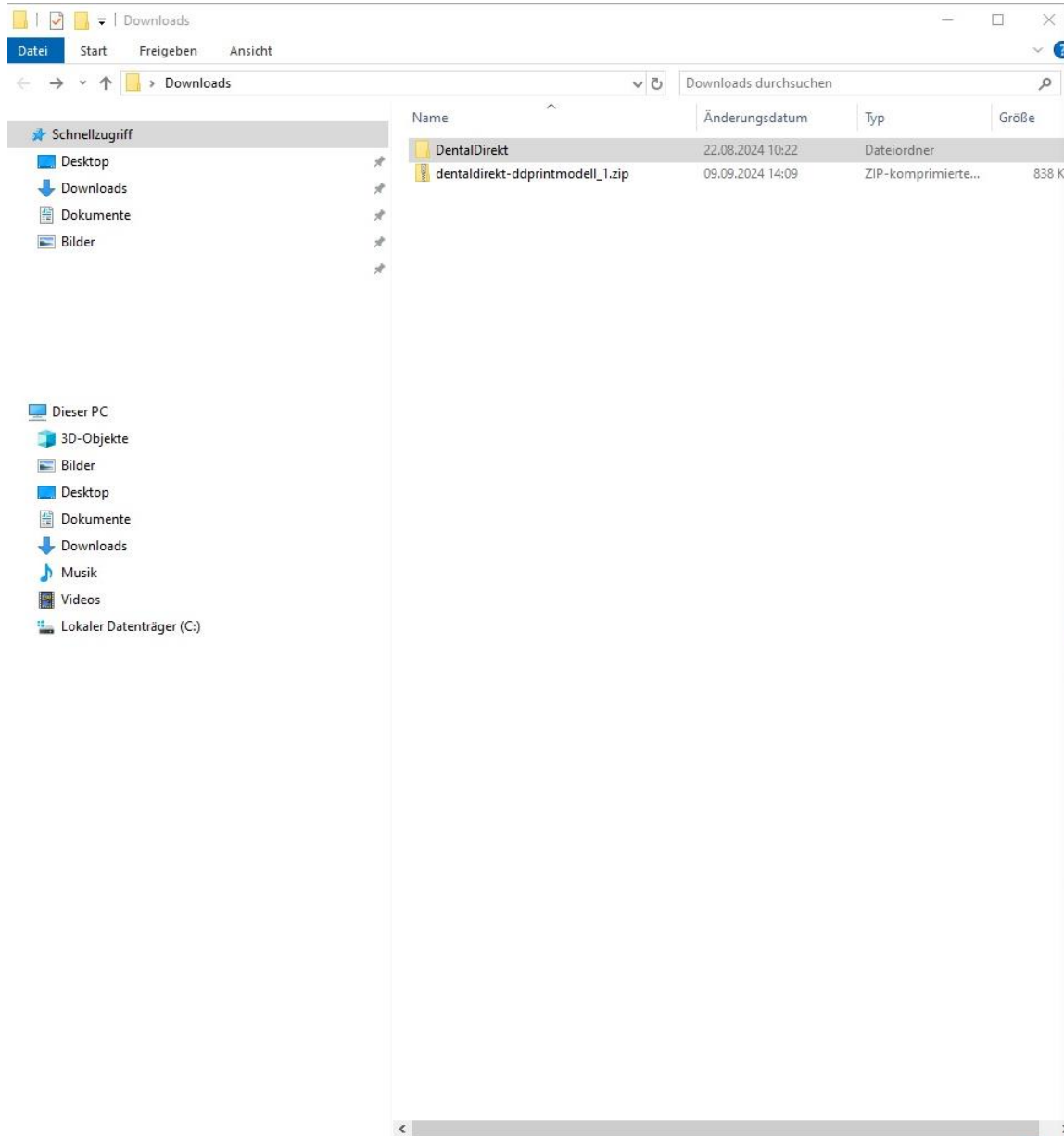

Nun bitte den Ordner modelcreator öffnen

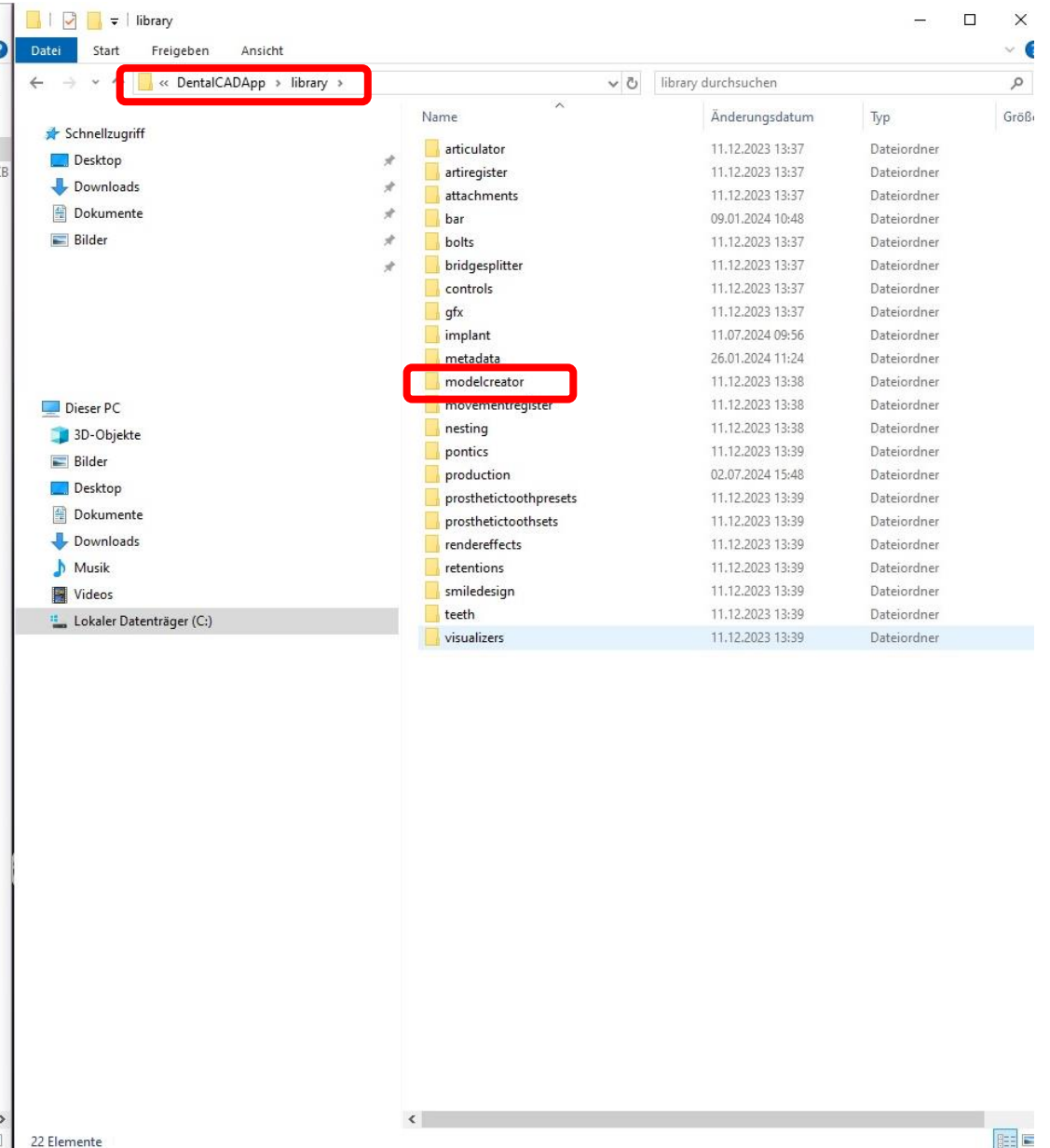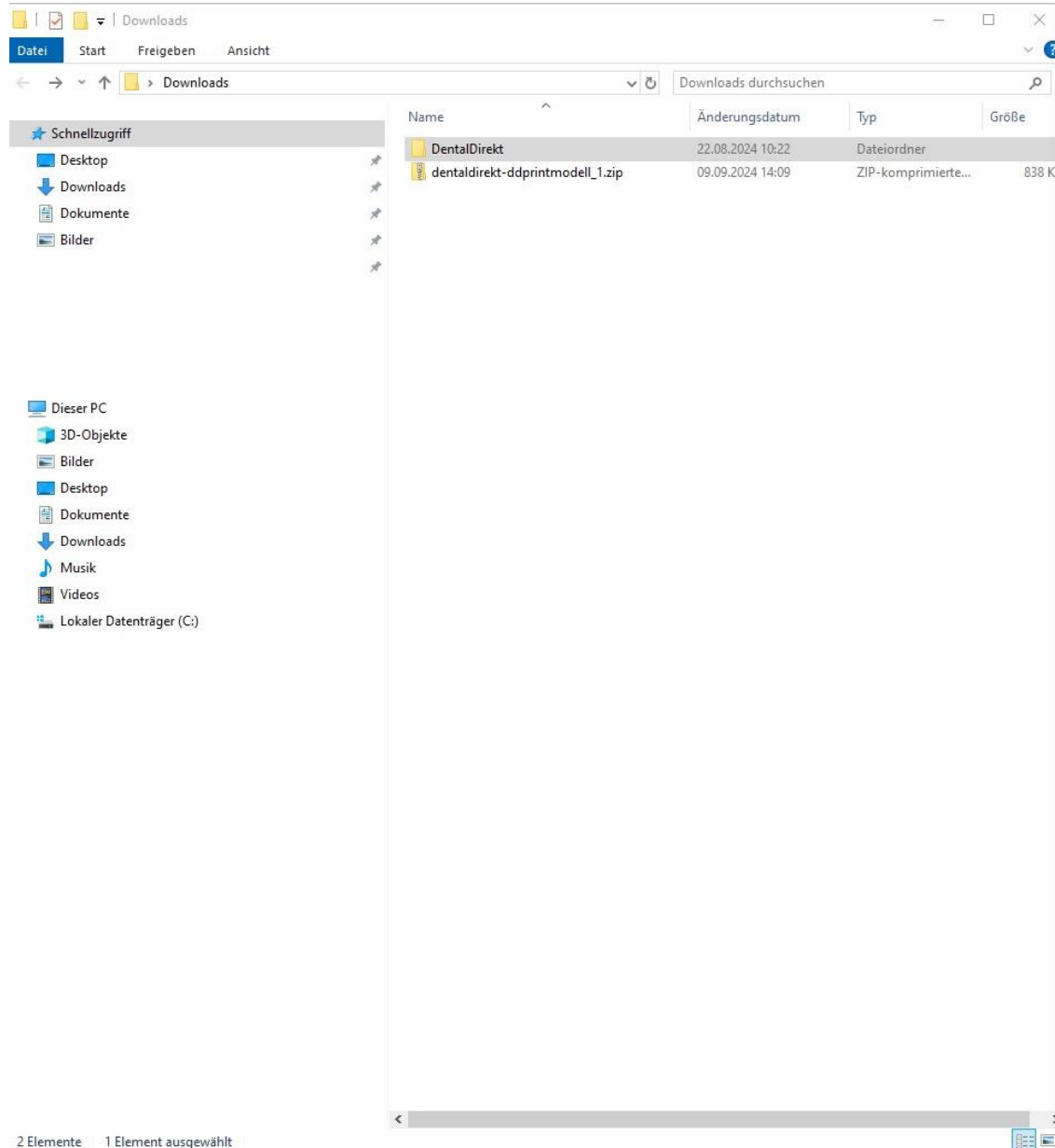

Anschließend öffnen Sie den Ordner plates

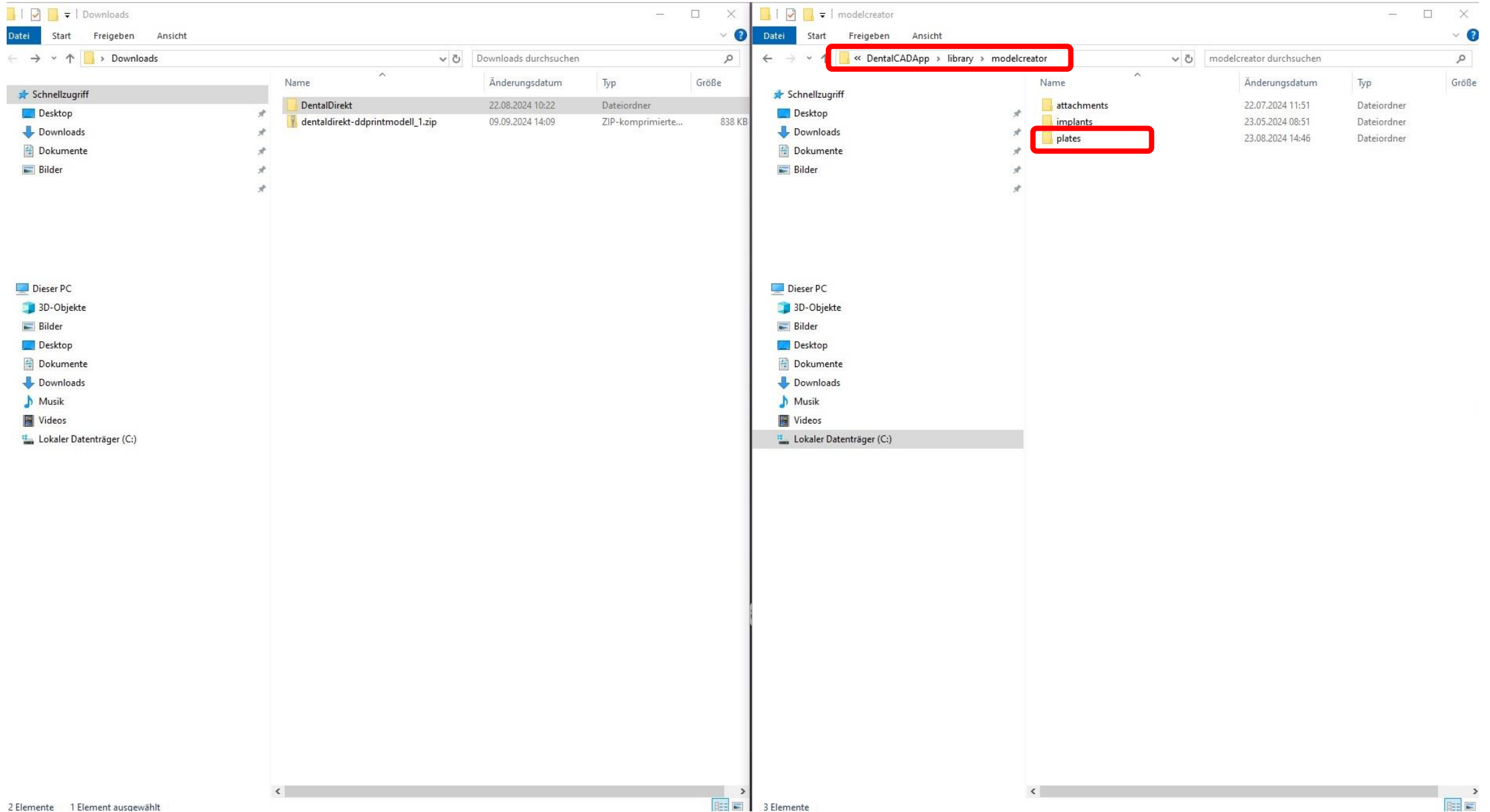

In den Ordner plates, den zuvor entpackten Ordner DentalDirekt kopieren



The image shows two side-by-side Windows File Explorer windows. The left window is titled 'Downloads' and shows a folder named 'DentalDirekt' selected. A red box highlights the 'Downloads' folder in the address bar. The right window is titled 'plates' and shows the path '« DentalCADApp » > library > modelcreator > plates'. A red box highlights this path in the address bar. A red arrow points from the 'DentalDirekt' folder in the left window to the 'DentalDirekt' folder in the right window. The word 'kopieren' is written in the center of the image. The status bar at the bottom of the left window shows '2 Elemente' and '1 Element ausgewählt'. The status bar at the bottom of the right window shows '4 Elemente' and '1 Element ausgewählt'.

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
DentalDirekt	22.08.2024 10:22	Dateiordner	
dentaldirekt-ddprintmodell_1.zip	09.09.2024 14:09	ZIP-komprimierte...	838 KB

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
DentalDirekt	22.08.2024 10:22	Dateiordner	

Jaw scans

All other parts

Teeth

Upper arch

Lower arch

Hidden

Show all

Auto hide


i

10:09

The scan data was automatically aligned. To undo the movement, click 'Reset'.

Folgende Modellvarianten stehen Ihnen zur Auswahl

1. Vollmodell Zahnkranz (herausnehmbarer Stumpf)
2. Vollmodell Zahnkranz (mit extra Stumpf)
3. Vollmodell Zahnkranz (Digitales Waxup)
4. gesockeltes Modell – Small
5. gesockeltes Modell – Medium
6. gesockeltes Modell - Large

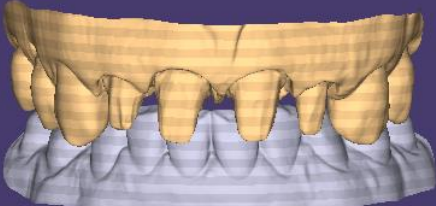

Model Alignment

Model Type

Dental Direkt - DDprintModell

Vollmodell Zahnkranz (herausnehm

Vollmodell Zahnkranz (herausnehmbarer Stumpf)

Vollmodell Zahnkranz (mit extra Stumpf)

Vollmodell Zahnkranz (mit Zahnfleischmaske)

Vollmodell Zahnkranz (Digitales Waxup)

gesockeltes Modell - Small

gesockeltes Modell - Medium

gesockeltes Modell - Large

Upper jaw

24,17 mm

Lower jaw

21,30 mm

Auto align

← BACK

NEXT →

exocad

DDprintmodel



CLOSE TO YOU